

실시간 환자모니터링 솔루션 킷 매뉴얼

실시간 환자 관찰하는 방법

Step 1.

솔루션 &
의료기기 준비하기

Step 2.

환자+의료기기
+수신기 매핑하기

Step 3.

환자에게
의료기기 적용하기

Step 4.

생체정보
실시간 관찰하기

Step 5.

매핑 해제 및
모니터링 종료하기

솔루션 구성품 개요



의료기기 - 하이카디 스마트패치

- 에너지 : 충전식 (8개 동시 가능)
- 소모품 : 전극 2개/1일 청구
- 측정항목 : 심전도(15개 부정맥), 맥박, 호흡, 피부온도, 활동상태



의료기기 - 노닌

- 에너지 : A2 배터리 교환식 (x2개)
- 측정항목 : 산소포화도, 맥박
- 비고 : 측정과 동시 전원 on, 탈착 시 자동 전원 off



수신기 - 환자명찰, 재실자표, v3

- 에너지 : 유선 (전원 플러그를 항상 콘센트에 꽂아 둡니다)
- 통신방식 : 블루투스
- 비고 : 수신기와 환자의 거리에 따라 측정 정보 수집이 달라집니다.



스마트병원 웹

- 웹 주소 및 로그인 : PC 바탕화면 메모장
- 주요 기능 : 매핑하기 (환자+기기+수신기 연결), 매핑해제하기, 생체정보 모니터링, 알람 범위 설정하기 외
- 비고 : PDA는 기기 매핑 용도



라이브스튜디오 (for 하이카디, 노닌 전용)

- 웹 주소 및 로그인 : PC 바탕화면 메모장
- 주요 기능 : 심전도 그래프 모니터링, 활동상태 조회, 부정맥 이벤트 알림 외
- 비고 : 중복 로그인 불가. 병동 당 ID 5~10개 부여



실시간 환자모니터링 솔루션 퀵 매뉴얼

Step 1. 솔루션 & 의료기기 준비하기

- 스마트병원 웹, PDA, 라이브스튜디오에 전달받은 접속주소와 병동별 공통 계정으로 로그인 합니다. 매핑하기는 PC, PDA 둘 중 편하신 것으로 하시면 됩니다.
- 충전이 완료된 연결 대기 상태의 기기와 필요한 소모품을 준비합니다. (예: 하이카디+전극2개, 노닌+배터리 2개)

Step 2. 환자+의료기기+수신기 매핑하기 [PC모드]

- ① 스마트병원 웹 '기기매핑관리' 화면에서 환자 확인 후 "+" 버튼을 클릭하여 '기기 정보' 팝업 창을 띄웁니다.
- ② '기기 정보' 팝업 창에서 "기기선택" 버튼을 클릭하여, '기기 검색' 팝업 창을 띄웁니다.
- ③ 준비한 의료기기의 QR 번호를 "검색" 후 "선택"합니다.
- ④ 매핑된 기기 정보를 확인하고 하단 "매핑하기"를 클릭합니다.
- ⑤ 매핑이 완료 팝업 창 "확인" 클릭 후, 환자, 의료기기, 수신기 연결 상태를 최종 점검합니다.

기기 매핑 관리

병동/부서: 의공부 | 전체 | 입원 | 전체 보기

환자의 이름 또는 환자등록번호를 입력하세요. [조회] [C]

1-5 / 5

병동/부서	병실	병상	환자 이름	환자등록번호	상태	매핑기기	동작
의공부	501	04	스마트	20260201	입원		① +
의공부	502	03	인도어	20260202	입원		+
의공부	503	01	플러스	20260203	입원		+
의공부	504	02	실시간	20260204	입원	B2842 X N0067 X	+

생체정보 모니터링 기기 정보

②

기기 검색

③

생체정보 모니터링 기기 정보

④

확인

⑤




실시간 환자모니터링 솔루션 퀵 매뉴얼

Step 2. 환자+의료기기+수신기 매핑하기 [PDA모드]




- ① App을 실행 후 PDA오른쪽 상단 버튼으로 환자 바코드를 스캔합니다.
- ② 생성된 환자 정보를 확인합니다.
- ③ 준비한 의료기기의 QR 번호를 같은 방법으로 스캔하여 생성 정보를 확인합니다.
- ④ 활성화된 '매핑' 버튼을 선택합니다.
- ⑤ 환자, 의료기기, 수신기 연결 상태를 최종 점검합니다.

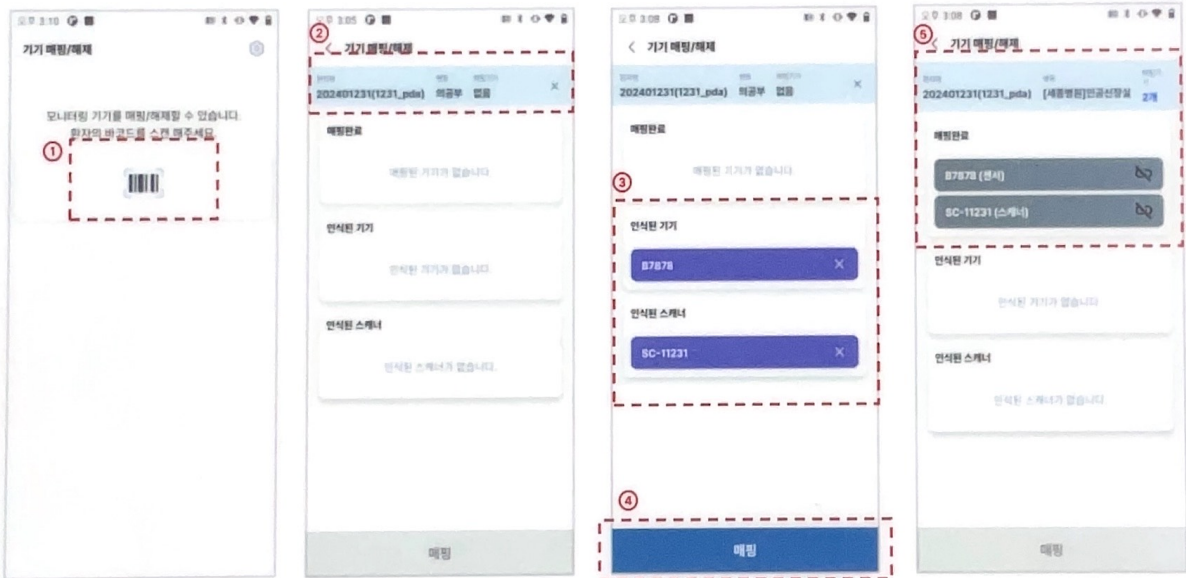

Step 3. 환자에게 의료기기 적용하기

[하이카디]


- 왼쪽 가슴, 중심선에서 30-45도 각도로 Nipple 바로 위에 부착합니다.
- 가슴이 큰 여성 환자의 경우, 가슴 중앙에서 왼쪽으로 위치를 조정하여, 피부가 평평한 부위에 부착해 주세요.
- 하이카디는 부착 위치에 따라 심전도 파형이 다르게 나타날 수 있습니다.

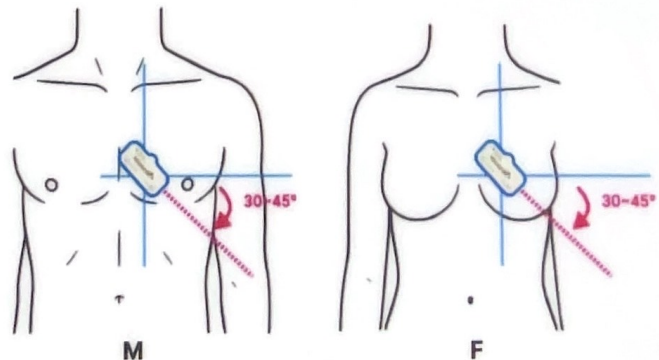

실시간 환자모니터링 솔루션 킷 매뉴얼

Step 4. 생체정보 실시간 관찰하기

2) 라이브스튜디오 (for 하이카디)

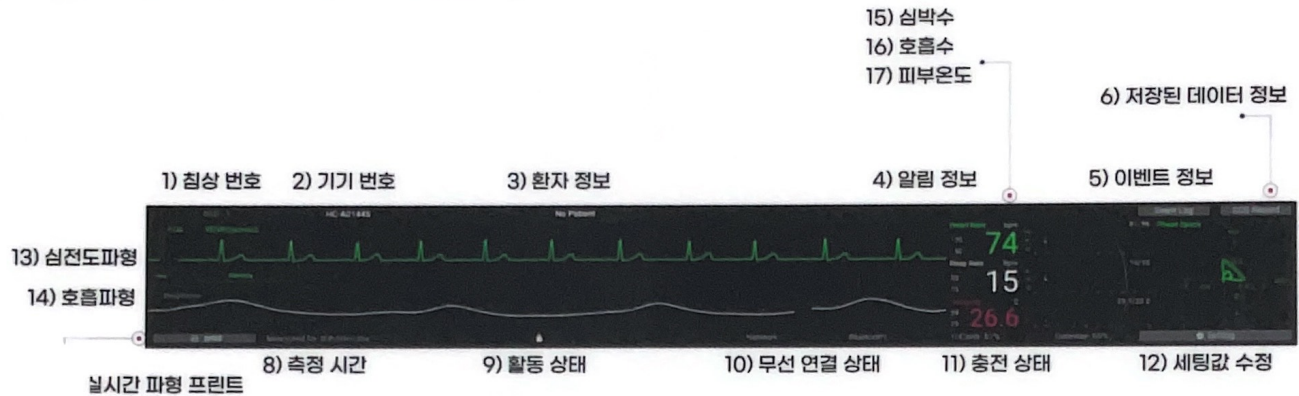

Step 5. 매핑 해제 및 모니터링 종료하기

1) 매핑 해제하기

[PC모드]

- ① 스마트병원 웹 '기기매핑관리' 화면에서 대상 환자의 매핑 상태를 확인합니다.
- ② 매핑 기기 항목의 "X" 표시를 클릭하여, 팝업 알림 창을 띄웁니다.
- ③ 매핑 해제 "확인" 선택 후 정상적으로 해제되었는지 확인합니다.

병동/부서	병실	병상	환자 이름	환자등록번호	상태	매핑기기	동작
의공부	501	04	스마트	20280201	입원		+
의공부	504	02	실시간	20280204	입원	B2842 X NO067 X	+

[PDA모드]

- ① App 실행 후, 대상 환자 바코드를 인식하여 매핑 상태를 확인합니다.
- ② 기기, 수신기 옆 해제 아이콘()을 클릭하여 팝업 알림 창을 띄웁니다.
- ③ 매핑 해제 "확인" 선택 후 정상적으로 해제되었는지 확인합니다.

2) 환자에게서 의료기기 탈착하기



실시간 환자모니터링 솔루션 킷 매뉴얼

FAQ

Q. 환자 침상 또는 병실이 바뀌었더니, 정보가 잘 끊기는 것 같아요.

A. 환자 침상 위에 있는 수신기에서 멀어지는 경우 정보가 끊길 수 있습니다. 스마트병원 웹 '기기매핑관리' 화면에서 환자 병실/병상 정보 변경 완료 후(EMR 연동 주기에 따라 자동 갱신 또는 환자 정보 일괄 불러오기 버튼 클릭), 기기 일괄 해제 후 다시 매핑해주세요.

Q. 검사실 이동하는 경우, 기기는 어떻게 하나요?

A. MRI 검사 예정인 경우, 반드시 탈착하여야 합니다. X-ray, CT 검사는 검사 부위에 따라 탈착이 필요합니다. 열을 이용하는 물리치료시에도 반드시 탈착해주세요. 그 외 검사실 직원분이 하이카디 등 소형 의료기기에 대해 사전 지식이 없는 경우라면, 안전한 관리를 위해 탈착하시는 것을 권유드립니다.

Q. 라이브스튜디오에서 심전도 그래프가 보이지 않고, 맥박수만 보여요.

A. 환자분이 복도에 있는 경우 재실자표를 통해 정보가 수집되고, 이 경우 숫자 정보만 보이고, 그래프는 보이지 않습니다. 스마트병원 웹페이지에서 하이카디 배터리 상태가 적절하고, 심박동 정보가 수집되고 있는 상태이면 하이카디 부착한 환자분을 블루투스 통신이 잘 되도록 침상 위 환자명찰 근처로 이동하여 확인해보시기 바랍니다. 이러한 조치에도 변화되지 않는다면 아래 고객센터로 문의주세요.

Q. '기기매핑관리' 화면 목록에서 입원 환자가 보이지 않아요.

A. EMR 시스템 연동 주기가 20분, 30분 등으로 약속되어 있습니다.. (병원마다 상이) 새로 입원하신 환자분에게 바로 적용하실 경우, 오른쪽 상단 주황색 '전체 화면 불러오기' 버튼을 클릭하시면 환자 목록이 업데이트 됩니다.

Q. 측정된 생체 정보 EMR 자동 저장 시 작성자가 시스템명으로 지정하는 것 같은데, 괜찮은가요?

A. 시스템이 자동 입력한 정보임을 알려주기 위해, 작성자를 시스템 명으로 설정하고 있습니다.

Q. 알람이 너무 자주 울리는데, 설정 변경하는 방법이 있나요?

A. 네, 환자분의 건강 상태를 반영하여 모니터링 범위를 설정하실 수 있습니다. '병실별 모니터링' 메뉴 선택 > 테이블의 '기기이름' 항목에 '기기번호' 선택 > 범위 설정 후 '범위 저장' 선택 > '확인' 하시면 됩니다.

Q. 기기 관리번호를 보여주는 QR이 떨어졌어요. 어떻게 하나요?

A. 아래 고객센터로 연락주세요. 카카오톡으로 병원/병동/기기종류/기기번호 (또는 사진 업로드하여 알려주시면 도와드립니다).

